

**Відбір, зберігання та транспортування в лабораторію
зразків бджіл та продуктів бджільництва при масовій загибелі бджіл**





ЗАКОН УКРАЇНИ
Про бджільництво



ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення
санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення

Правила відбору
зразків патологічного
матеріалу,
крові, кормів, води та
пересилання їх для
лабораторного
дослідження

Голова Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства Уроку України П.Л.Догановський

№ 15-14/111
від 15 квітня 1997 року

Інструкція щодо
попередження та ліквідації
хвороб і отруень бджіл

Головний державний інспектор ветеринарної
медицини України

№ 9 від 30.01.2001 року

Міністерство юстиції України

№ 131/5322
від 12 лютого 2001 року

Профілактика
та діагностика отруень бджіл
пестицидами

Затверджена головним управлінням ветеринарії
Міністерства Сільського господарства СРСР
01.01.1985



**Правила відбору
зразків патологічного
матеріалу,
крові, кормів, води та
пересилання їх для
лабораторного
дослідження**

*Голова Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства агропродовольства України П.П.Достовіський*

**№ 15-14/111
від 15 квітня 1997 року**

Зразок та пакет документів
подається до акредитованої, на даний вид досліджень,
лабораторії



Супровідний лист

- назва господарства
- П.І.П.-власника пасіки
- адреса
- телефон
- номер пасіки
- номер вулика
- к-ть проб
- характерні ознаки захворювання
- мета дослідження

- ПОСАДА
- П.І.П.
- підпис
- ДАТА СКЛАДАННЯ



+

АКТ

комісійного обстеження
на предмет

зазначити отрутохімікат
на який необхідно провести
дослідження

Вірусні захворювання



При підозрі на **вірусологічні** захворювання
(хронічний параліч, гострий параліч, філаментовіроз)





Бактеріальні захворювання

Pseudomonas aeruginosa на МПА

Гнильцевих захворюваннях та мішечкуватому розплоді



Уражена сім'я №3

Уражена сім'я №2

Уражена сім'я №1



лялечка хвора



личинка хвора



бджола хвора




лялечка загинула



личинка загинула



бджола загинула

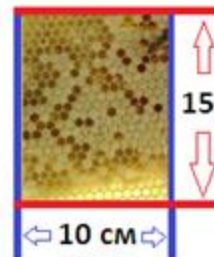

15 см

10 см

стілник



ДЕРЖАВНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

При підозрі на **септичні** захворювання



Уражена сім'я №3

Уражена сім'я №2

Уражена сім'я №1



бджола загинувши

з ознаками хвороби

50 штук



ДЕРЖАВНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

Паразитологічні захворювання



паразити



паразити бджіл
з м'якою основою



паразити бджіл
з твердою основою



- дата та час відбору
- номер зразку
- назва
- номер вулика
- номер пасіки
- показник на який треба дослідити
- адреса
- П.І.П. посада, підписи
- печатка



Вароатоз



ЗИМА



пасіка

мертва бджола
сміття



200 гр

всесна



пасіка

бджолиний розплід
на стільнику з
нижнього краю
розміром 3 * 5см
та сміття

200 гр

літо



від підозрілих

проби запечатаного
розплоду (бджолині або
трутневі) 3*15см або 100
бджіл від 10 % підозрілих
бджолосімей пасіки



ДЕРЖАВНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

Паспортизація або інші захворювання



При підозрі на отруєння



бджола загинула
500 штук

відкачаний
назапечатаний
МЕД
200гр

перга
50гр

500-1000 гр.
маси рослин
з яких бджоли
здійснюють
медонос



Транспортування живих бджіл



- дата та час відбору
- номер зразку
- назва
- номер вулика
- номер пасіки
- показник на який треба дослідити
- адреса
- П.І.П. посада, підписи
- печатка



Рамки з сотами





- дата та час відбору
- номер зразку
- назва
- номер вулика
- номер пасіки
- показник на який треба дослідити
- адреса
- П.І.П. посада, підписи
- печатка



Мертвих бджіл та сміття з вулика



бджола мертва

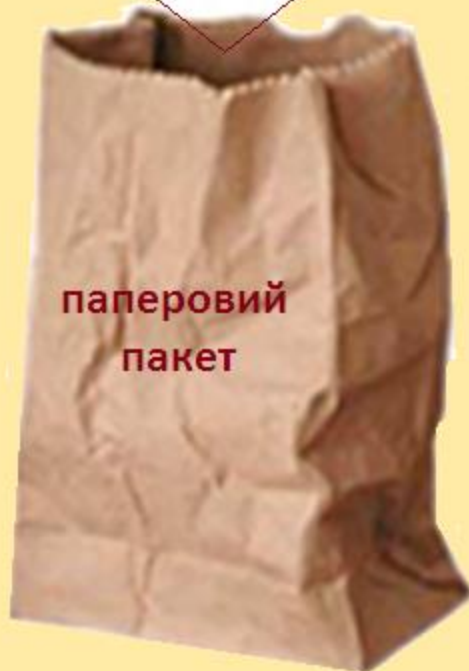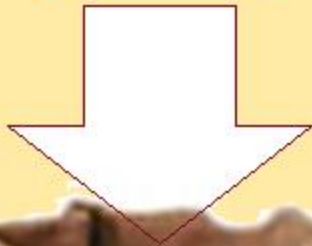

паперовий пакет


- дата та час відбору
- номер зразку
- назва
- номер вулика
- номер пасіки
- показник на який треба дослідити
- адреса
- П.І.П. посада, підписи
- печатка



Зелена маса та підмір бджіл



- дата та час відбору
- номер зразку
- назва
- номер вулика
- номер пасіки
- показник на який треба дослідити
- адреса
- П.І.П. посада, підписи
- печатка

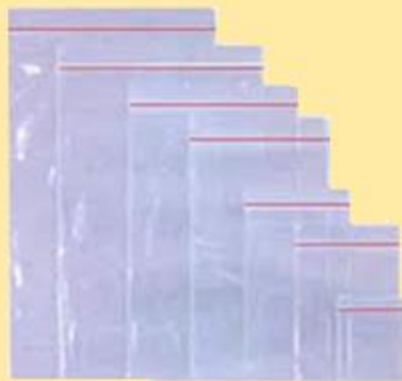

Термін доставки зразка не повинен перевищувати **2 доби !!!**



ДЕРЖАВНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

В літню пору року зразки поміщають у термос із льодом або холодильник





Дякую за увагу